

Instructie klaarmaken toedieningsspuit en -naald

Vaccin: Bimervax LP.8.1 (HIPRA) 40 mcg; kant-en-klaar
Doserings: 0,5 ml
Leeftijd: 12 jaar en ouder
Doses per flacon: 1
Spuut / naald: SOL-M / BD Eclipse 23G

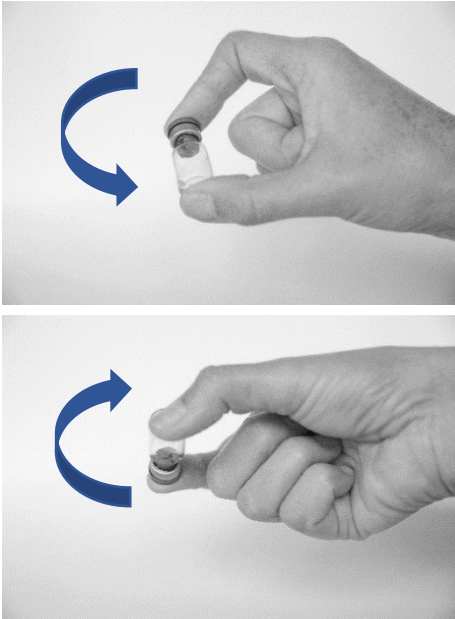


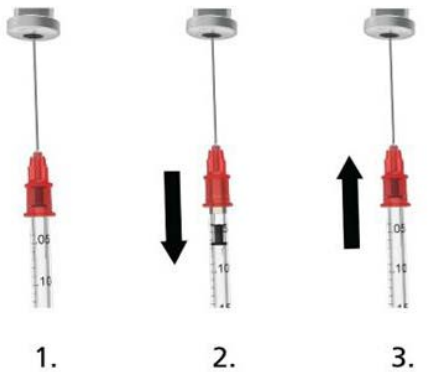
Deze instructie beschrijft hoe het Bimervax LP.8.1 (HIPRA) 40 mcg kant-en-klaar vaccin klaargemaakt moet worden met de SOL-M toedieningsspuit en het BD Eclipse 23G veiligenaaldsysteem.



NB. Bij het maken van de foto's is gebruik gemaakt van een dummy vaccinflacon. De kleur van het vaccin in de flacon wijkt daarom af. Normaal is de oplossing wit.

1		Handen wassen • Voor het landelijk kader voor COVID-19-vaccinaties, zie de uitvoeringsrichtlijn op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie • Handhygiëne: zie paragraaf 7.1 van de uitvoeringsrichtlijn en https://www.rivm.nl/documenten/instructies-handenwassen
2		Zet de benodigdheden binnen handbereik • Vaccinflacon • Optreknaald 18G • SOL-M toedieningsspuut 1 ml • BD Eclipse 23G veilige naaldsysteem • Naaldencontainer • Wiva-vat (blauwe bak met gele deksel) • Pen NB 1. Zie bijlage 2 van de uitvoeringsrichtlijn voor close-up foto's van de spuiten en naalden. NB 2. Zie hoofdstuk 6 van de uitvoeringsrichtlijn voor informatie over temperatuur, houdbaarheid en expiratiedatum. NB 3. Spuiten en naalden pas vlak voor gebruik uit de verpakking halen om contaminatie van de tip van de spuit waarop de injectienaald wordt bevestigd en de naaldaansluiting (naaldconus) te voorkomen.
3	 Bimervax LP.8.1 kant-en-klaar vaccin	Inspectie inhoud vaccinflacon • Expiratiedatum • Glasbreuk • Kleur: witte homogene emulsie • De kleur van het flip-off kapje is blauw en de dosering is 40 microgram/dosering.

4		Vaccinflacon 10 x zwenken • Let op: zwenken/omkeren, niet schudden!
5		Flip-off-kapje vaccinflacon verwijderen • Flip-off-kapje verwijderen zonder de rubberen dop aan te raken. Het vaccin is in een steriele omgeving geproduceerd. De rubberen dop hoeft daardoor niet gedesinfecteerd te worden.
6		Klaarmaken eerste toedieningsspuit • SOL-M toedieningsspuit (1 ml) en optreknaald (18G) uit de verpakking halen en koppelen. • Vaccinflacon aanprikken met optreknaald. NB. Raak hierbij rubberen dop, tip van de spuit (conus) en naald niet aan. De naaldconus, in dit geval rood, aan de zijkant vasthouden als de optreknaald wordt vast- of losgekoppeld. Let op dat de bovenkant van de naaldconus met het lumen niet aangeraakt wordt.

7	 1. 2. 3.	Vaccin optrekken • Draai de vaccinflacon voorzichtig omhoog (1). Dit zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in de vaccinflacon zich naar boven kan verplaatsen. • Trek via de optreknaald een kleine hoeveelheid vaccin op in de toedieningsspuit (2). Er zal een luchtbel zichtbaar zijn. • Druk de zuiger vervolgens voorzichtig terug naar de beginpositie van de toedieningsspuit (3). • Herhaal de bewegingen (2) en (3) totdat er geen lucht meer zichtbaar is en trek vervolgens vaccin op tot het streepje bij 0,5 ml in de toedieningsspuit.
8		BD Eclipse 23G veilige naaldsysteem op SOL-M toedieningsspuit zetten • SOL-M toedieningsspuit losdraaien van de optreknaald. • Plaats BD Eclipse 23G veilige naaldsysteem op de SOL-M toedieningsspuit. • Draai deze goed aan, u kunt hierbij enige weerstand voelen. • De toedieningsspuit is nu klaar voor gebruik. • Het vaccin moet zo snel mogelijk worden toegediend.