


# Instructie klaarmaken toedieningsspuit

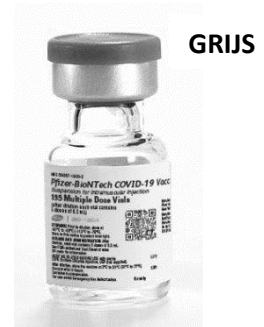

- Leeftijd: 12 jaar en ouder
- Vaccin: Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 30 mcg; kant-en-klaar vaccin
- Spuit / naald: SJJ / SJJ (zero residual)
- Toepassing: Basisserie & booster: 0,3 ml


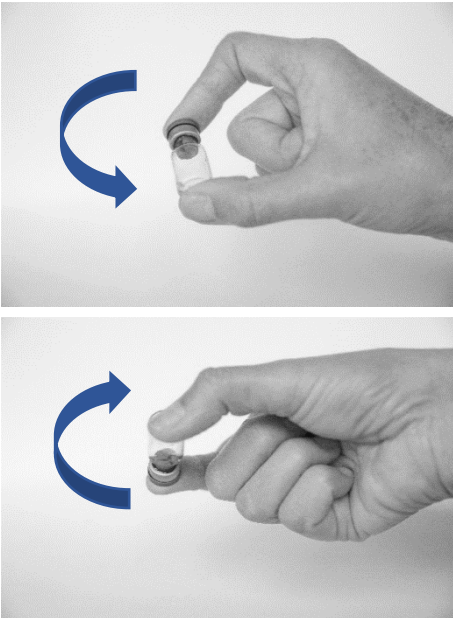
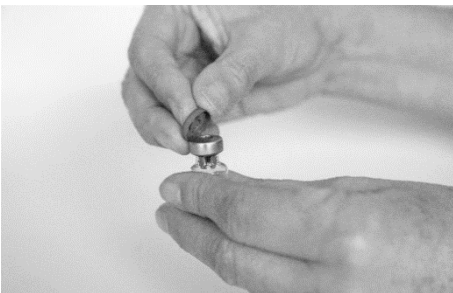



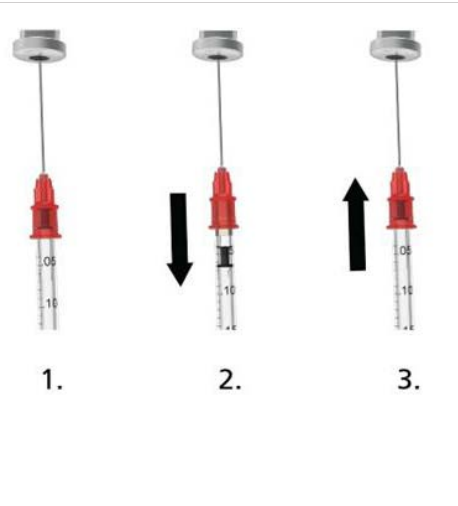
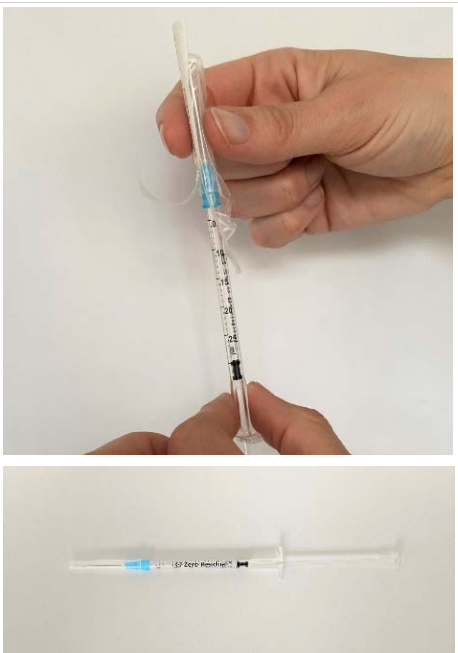
Deze instructie beschrijft hoe het vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 30 mcg kant-en-klaar vaccin klaargemaakt moet worden met de SJJ (zero residual) -toedieningsspuit en de SJJ (zero residual)-injectionaald. Het is belangrijk dat de spuit en naald van SJJ uitsluitend in combinatie met elkaar gebruikt worden.


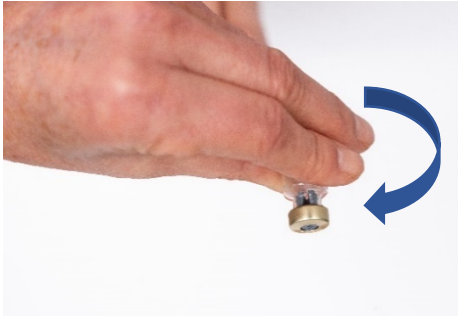


NB. Bij het maken van de foto's is gebruik gemaakt van een dummy vaccinflacon. De kleur van het vaccin in de flacon wijkt daarom af. Normaal is de oplossing wit tot gebroken wit.

1		<p>Vaccineren tijdens COVID-19-pandemie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het landelijk kader voor COVID-19 vaccinaties, zie de uitvoeringsrichtlijn op <a href="https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie">https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie</a></li> <li>• Handhygiëne: zie paragraaf 6.1 van de uitvoeringsrichtlijn en <a href="https://www.rivm.nl/documenten/instructies-handenwassen">https://www.rivm.nl/documenten/instructies-handenwassen</a></li> </ul>
2		<p>Zet de benodigdheden binnen handbereik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccinflacon</li> <li>• Optreksnaald 18G</li> <li>• SJJ (zero residual)-toedieningsspuit 0,3 ml (6x, max. 7x)</li> <li>• SJJ (zero residual)-toedieningsnaald 23G (6x, max. 7x)</li> <li>• Naaldencontainer</li> <li>• Wiva-vat (blauwe bak met gele deksel)</li> <li>• Desinfectie-swabs voor het ontsmetten van de rubberen dop, indien deze meerdere keren met een optreksnaald wordt aangeprikt</li> <li>• Pen</li> </ul> <p>NB 1. Zie bijlage 6 van de uitvoeringsrichtlijn voor close-up foto's van de spuiten en naalden.</p> <p>NB 2. Het vaccin in de vaccinflacon is bij kamertemperatuur (tot 30°C) maximaal 12 uur houdbaar!</p> <p>NB 3. Spuiten en naalden pas vlak voor gebruik uit de verpakking halen om contaminatie van de tip van de spuit waarop de injectienaald wordt bevestigd en de naaldaansluiting (naaldconus) te voorkomen.</p> <p>NB 4. De SJJ zero residual-toedieningsspuit en -toedieningsnaald mogen alleen in combinatie met elkaar gebruikt worden.</p>

<p>3</p>	 <div data-bbox="414 571 670 757" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>GRIJZE dop 12 jaar en ouder Ready – To - Use</p> </div>	<p>Inspectie inhoud vaccinflacon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expiratiedatum</li> </ul> <p>NB. In verband met de verlengde houdbaarheid is de oranje sticker op de tray bepalend voor de uiterste houdbaarheidsdatum van het vaccin. Wanneer de expiratiedatum op de flacon verlopen is, dient de bereider ervan overtuigd te zijn dat het vaccin nog gebruikt kan worden na controle van de maximale houdbaarheid op de tray.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdstip waarop flacon na ontdooien niet meer gebruikt mag worden. Dit staat op de tray.</li> <li>• Glasbreuk</li> <li>• Kleur Comirnaty in ontdooide vorm: wit tot gebroken wit</li> <li>• Vóór zwenken/ omkeren kan het concentraat ondoorzichtige amorphe deeltjes bevatten</li> <li>• De kleur van het flip-off kapje is grijs en de dosering is 30 microgram/dosering.</li> </ul>
<p>4</p>		<p>Vaccinflacon 10 x zwenken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Let op: zwenken/omkeren, niet schudden!</li> </ul>
<p>5</p>		<p>Grijs flip-off-kapje vaccinflacon verwijderen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flip-off-kapje verwijderen zonder de rubberen dop aan te raken. Het vaccin is in een steriele omgeving geproduceerd. De rubberen dop hoeft daardoor <b>bij het eerste gebruik</b> niet gedesinfecteerd te worden.</li> </ul>

6		<p>Klaarmaken eerste toedieningsspuit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SJJ (zero residual)-toedieningsspuit (0,3 ml) en optreknaald (18G) uit de verpakking halen en koppelen.</li> <li>• Vaccinflacon aanprikken met optreknaald.</li> </ul> <p>NB. Raak hierbij rubberen dop, tip van de spuit (conus) en naald niet aan. De naaldconus, in dit geval rood, aan de zijkant vasthouden als de optreknaald wordt vast- of losgekoppeld. Let op dat de bovenkant van de naaldconus met het lumen niet aangeraakt wordt.</p>
7		<p>Vaccin optrekken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de vaccinflacon voorzichtig omhoog (1). Dit zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in de vaccinflacon zich naar boven kan verplaatsen.</li> <li>• Trek via de optreknaald een kleine hoeveelheid vaccin op in de toedieningsspuit (2). Er zal een luchtbel zichtbaar zijn.</li> <li>• Druk de zuiger vervolgens voorzichtig terug naar de beginpositie van de toedieningsspuit (3).</li> <li>• Herhaal de bewegingen (2) en (3) totdat er geen lucht meer zichtbaar is en trek vervolgens vaccin op tot het streepje bij <b>0,3 ml</b> in de toedieningsspuit.</li> </ul>
8		<p>SJJ (zero residual)-toedieningsnaald op SJJ (zero residual)-toedieningsspuit zetten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SJJ (zero residual)-toedieningsspuit (0,3 ml) losdraaien van de optreknaald.</li> <li>• Plaats de SJJ (zero residual)-toedieningsnaald (23G) op de SJJ (zero residual)-toedieningsspuit.</li> <li>• De toedieningsspuit is nu klaar voor gebruik.</li> <li>• Het vaccin moet zo snel mogelijk worden toegediend.</li> </ul> <p>NB. De optreknaald blijft in de vaccinflacon wanneer er aansluitend meerdere toedieningsspuiten worden gevuld.</p>

9A		<p>Vaccinflacon meteen volledig gebruiken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het direct klaarmaken van de volgende 5 of 6 toedieningsspuiten: toedieningsspuit op de optreknaald zetten. Vervolgens de stappen 7 en 8 herhalen.</li> <li>• Als de toedieningsspuiten zijn gevuld, wordt de vaccinflacon met optreknaald erin weggegooid in een Wiva-vat. Zie ook paragraaf 7.7 van de uitvoeringsrichtlijn.</li> </ul>
9B	  	<p>Aangebroken vaccinflacon deels verbruiken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien er een (korte) pauze zit tussen het klaarmaken van de toedieningsspuiten, de optreknaald uit de vaccinflacon halen.</li> <li>• Optreknaald in naaldencontainer gooien.</li> </ul> <p>NB. Zo wordt voorkomen dat er een open verbinding blijft tussen het vaccin en de buitenlucht met risico op contaminatie.</p> <p>Na een pauze meer toedieningsspuiten voorbereiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x zwenken/omkeren. Let op: niet schudden!</li> <li>• Rubberen dop van de vaccinflacon ontsmetten met desinfectie-swab.</li> <li>• Wachten tot het rubber droog is (<math>\pm</math> 1 minuut).</li> <li>• Doorloop stap 6 t/m 9.</li> <li>• Na de laatste keer worden de vaccinflacon met optreknaald erin weggegooid in een Wiva-vat. Zie ook paragraaf 7.7 van de uitvoeringsrichtlijn.</li> </ul>